


**AL 3304**

- Mittelsäule  
DAC Universal - connecting column  
- colonne de raccordement

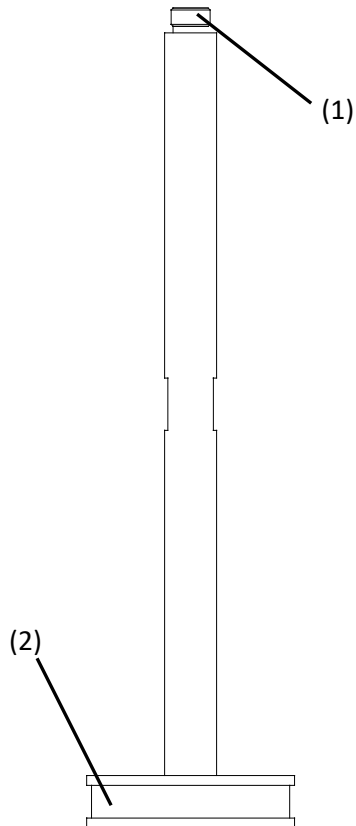

**AL 3304 –  
Mittelsäule DAC Universal MK IV**

**Sicherheitshinweis**



Nach der Anwendung ist die Mittelsäule heiß.

**Achtung: Verbrennungsgefahr**

**HINWEIS**



Die Mittelsäule ist nur zur Anwendung am „Blue Lid“ des DAC Universal MK IV.



Zur bestimmungsgemäßen Anwendung ist weiteres Equipment von **-ebro®** erforderlich.

- AL 3300, DAC Adapter-Set zur thermischen Validierung am DAC Universal
- Datenlogger der EBI 11 Serie zur thermischen Validierung am DAC Universal

**Anwendung**

Schrauben Sie zur thermischen Validierung am DAC Universal MK IV die Mittelsäule (1) handfest in das dafür vorgesehene Gewinde im Zentrum der Innenseite des „blue Lid“.

Befestigen Sie in der Nut (2) den Loggerhalter wie in der Bedienungsanleitung zum AL 3300 beschrieben.



Beachten Sie hierfür die Bedienungsanleitung des AL 3300.



**Ein Nichtbeachten dieser Anleitung oder der Bedienungsanleitung AL 3300 kann zu Beschädigungen am Gerät führen.**

**AL 3304 –  
Connecting column DAC Universal MK IV**

**Safety Instructions**

Don't touch the connecting column after usage.

**Attention: danger of burning**

**HINT**



The connecting column is for usage at „Blue Lid“ of the DAC Universal MK IV only.



Intended use requires further equipment from **-ebro®**.

- AL 3300, DAC Adapter-Set for thermal validation at DAC Universal
- EBI 11 data logger to measure temperature and pressure for thermal validation at DAC Universal.

**Usage**

For thermal validation on the DAC Universal MK IV, screw the center column (1) hand-tight into the thread provided in the center of the inside of the „blue lid“.

Attach the logger holder in the groove (2) as described in the user manual of the AL 3300.



Please observe the user manual of the AL 3300.



**Failure to follow these instructions or the AL 3300 user manual may damage the device.**

**AL 3304 –  
Colonne de raccordement DAC Universal MK IV**

**Consignes de sécurité**

Après utilisation, la colonne de raccordement est chaude.

**Attention : Risque de brûlures**

**ALLUSION**



La colonne de raccordement est seulement pour l'utilisation dans le « Blue Lid » de DAC Universal MK IV.



L'utilisation prévue nécessite un équipement supplémentaire de **-ebro®**.

AL 3300, adaptateur ensemble pour validation thermique sur DAC Universal.  
Enregistreurs de données de la série EBI 11 pour la validation thermique sur le DAC Universal

**Application**

Pour la validation thermique sur le DAC Universal MK IV, vissez à la main la colonne centrale (1) dans le filetage prévu au centre de l'intérieur du "Blue Lid".

Fixez le support de l'enregistreur dans la rainure (2) comme décrit dans le manuel d'utilisation de l'AL 3300.



Veuillez respecter le mode d'emploi de l'AL 3300.



**Si vous ne suivez pas ces instructions ou le manuel d'utilisation de l'AL 3300, vous risquez d'endommager l'appareil.**